



**FECALSWAB™:**  
ဝမ်းနမူနာစုဆောင်းနည်း

*Parkview Health သည် လက်ရှိ ဝမ်းနမူနာစုဆောင်းနည်းစနစ်များကို COPAN FecalSwab™ ဖြင့် အစားထိုးမည်ဖြစ်ပါသည်။*



ကပ်အိတ်ကိုဖွင့်ပါ



နမူနာကိုထုတ်ယူပါ။ နမူနာတံ ထိပ်ဖျားကို မထိပါနှင့်။ ပိုင်းခြားအမှတ် အပေါ်မှ နမူနာလက်ကိုင်နေရာ ကိုသာ အမြဲကိုင်ပါ။



နမူနာ၏ထိပ်ပိုင်းစပိုင်းအားလုံးအား ဝမ်းနမူနာထဲသို့ ထည့်၍ လှည့်ပြီး ဝမ်းနမူနာအနည်းငယ်ယူပါ။ **မှတ်ချက်။** သွေးရှိသော၊ ချွဲနေသော၊ အရည်များသော နေရာများကိုယူသင့်ပါသည်။




နမူနာတံ၏ထိပ်ဖျားတွင်ဝမ်းများ မြင်နိုင်စေရန် သေချာစစ်ဆေးပါ။ လိုအပ်ပါက နမူနာထိပ်အား မစင် နမူနာထဲသို့ ထပ်မံထည့် သွင်းပြီး နမူနာထိပ်ဖျား၏ ဧရိယာအားလုံး ကို ဝမ်းနမူနာနှင့် ထိတွေ့ရရှိ ကြောင်း သေချာစေရန် လှည့်ပါ။



နမူနာထိပ်ဖျားကို FecalSwab™ ပြန်ထည့်ပြောင်းထည့်ပြီး လေ ဘယ်ပေါ်ရှိ အများဆုံး ဖြည့်မှတ် မျဉ်း (“MAX. FILL”) ထက် မကျော်လွန်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။ **မှတ်ချက်။** ရယူထားသော ဝမ်းနမူနာ သည် အများဆုံးဖြည့်မှတ်မျဉ်း ထက် ကျော်လွန် ပါက နမူနာတံနှင့် ပြန်ကို စွန့်ပစ်ပြီး အခြား FecalSwab™ ကို အသုံးပြု၍ နမူနာ အသစ်တစ်ခုကို ရယူစုဆောင်းပါ။



လက်မနှင့် လက်ညှိုးကြားရှိ နမူနာကိုင်တံကို ကိုင်ထားပြီး မျှတစွာပျံ့နှံ့စေရန်နှင့် နမူနာပြန် တွင်စနစ်တကျရှိစေရန် နမူနာပြန်နံရံထဲ၌ ဝမ်းနမူနာကို ရောမွှေပါ။

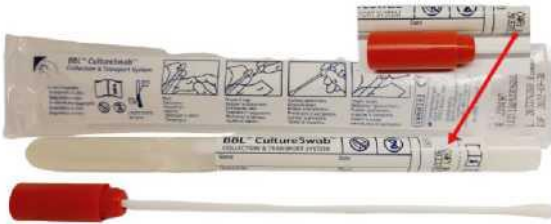

နမူနာကုဒ်:  
ဝမ်း၏သဏ္ဍာန်:  
**CXSTO/LAB223**



ပြန်ကို သင့်မျက်နှာနှင့် အဝေးတွင် ထားပါ။ နမူနာတံ၏အဆုံးကို ကိုင်ထားပါ။ ပိုင်းခြားအမှတ်တွင်ကွဲ ပြားစေရန် ၁၈၀ ဒီဂရီကွေးပါ။ လိုအပ်ပါက ပြန်ထည့်လုံးဝကျန်နေရန် လက်မနှင့် လက်ညှိုးကြားရှိ နမူနာတံကို ညင်သာစွာလှည့်ပါ။ နမူနာတံအားဖယ်ရှားစွန့်ပစ်ပြီး နောက် အပိတ်ကိုတင်းကျပ်စွာ ပိတ်ပါ။



ဝမ်းနမူနာများ တစ်သား တည်းဖြစ်သည်အထိ ပုလင်းကိုလှုပ်ခါပါ။



ပြန်ပေါ်တွင် လူနာ၏အမည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကိုရေးပါ သို့မဟုတ် လေဘယ် တစ်ခု အသုံးပြုကာ နမူနာအား ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့ပါ။